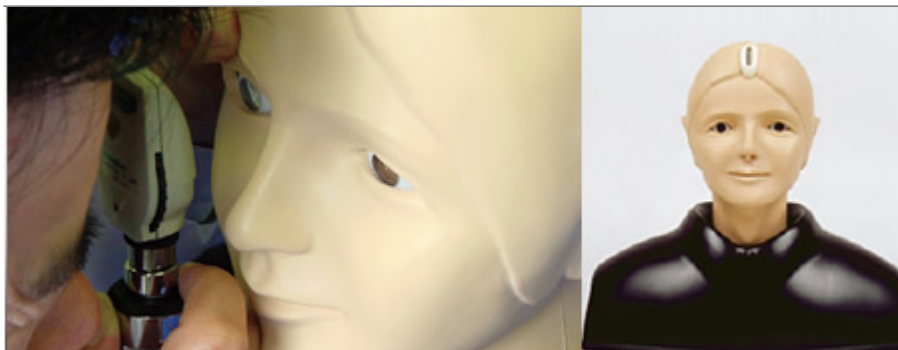




Cena bez DPH

1.620,00 Eur

Cena s DPH

1.944,00 Eur

Parametre

Množstevná jednotka

ks

- Detailný popis

Simulátor EYE je inovatívnym pomocníkom pri výučbe vyšetrovania očného pozadia. Je navrhnutý tak, aby mohli študenti vyšetrovať očné pozadie svojím vlastným oftalmoskopom. Možno simulovať rôzne prípady za použitia rôznych kombinácií diapozitívov, hĺbky a priemeru šošovky.

Mäkký a pružný materiál umožňuje praktickú simuláciu skutočných vyšetrovacích procedúr, napríklad zdvíhanie očného viečka.

Vlastnosti:

- Vhodné k nácviku so všetkými typmi priamych oftalmoskopov. Očná buľva s šošovkou dobre reprodukuje os videnia ľudského oka, takže zaisťuje realistický pohľad na očné pozadie.
- Pri nesprávnom použití nástroja nemožno očné pozadie jasne pozorovať.
- Možné upraviť priemer šošovky.
- Hĺbkou slajdu s očným pozadím možno upraviť v troch krokoch, a je tak možné demonštrovať rozdiely medzi ďalekozrakým, zdravým a krátkozrakým okom.
- Možno pozorovať červený odraz.
- Desať diapozitívov s rôznymi očnými pozadiami slúži k nácviku rozpoznávania bežných ochorení oka. Diapozitívy sú vytvorené podľa skutočných záberov tak, aby bolo zobrazenie skutočne verné.
- Mäkký a pružný materiál umožňuje praktický nácvik vyšetrovacích procedúr, ako napríklad zdvíhanie očného viečka.

Sada obsahuje:

- 1 model hlavy a ramien
 - 1 ovládač šošovky: 3 polohy (priemer 2, 3,5 a 5 mm)
 - 1 držiak na diapozitívy s možnosťou nastavenia hĺbky v troch krokoch
- 1 sada diapozitívov (10 prípadov pravé oko, 10 prípadov levé oko)
- 1 čistič prachu na diapozitívy
- 1 prenosné puzdro

Rozmery figuríny: 42 × 21,5 × 38 cm, 2 kg

Rozmery balenia: 30 × 70 × 50 cm, 10 kg

Diapozitívy (sada desiatich):

- Normálne očné pozadie
- hypertenzná retinopatia
- Bežná / diabetická retinopatia
- Papiloedém (chronický)
- Papiloedém (akútny)
- glaukomatózna atrofia
- Oklúzia retinálnej žily (akútna fáza)
- Oklúzia retinálnej žily (po laserovej fotokoagulácii)
- Toxoplazmóza: retinochoroiditida
- Vekom podmienená makulárna degenerácia

Chcete stránku vytlačiť?

Skryť pred tlačou nejaké časti stránky.



Vytlačiť časť stránky

Vytlačiť celú stránku tak, ako ju vidíte.



Vytlačiť celú stránku

(tento box nebude vytlačený)

Úprava stránky pred tlačou

Postavte sa kurzorom na nejaký obsah na stránke, zobrazí sa červený obdĺžnik. Kliknutím na neho obsah skryjete. Potom stisnite tlačidlo 'Vytlačiť'.



Vytlačiť!



Zobraziť všetko