


LF03670 - Interaktívny EKG simulátor

Objednávací kód: 4107.LF03670

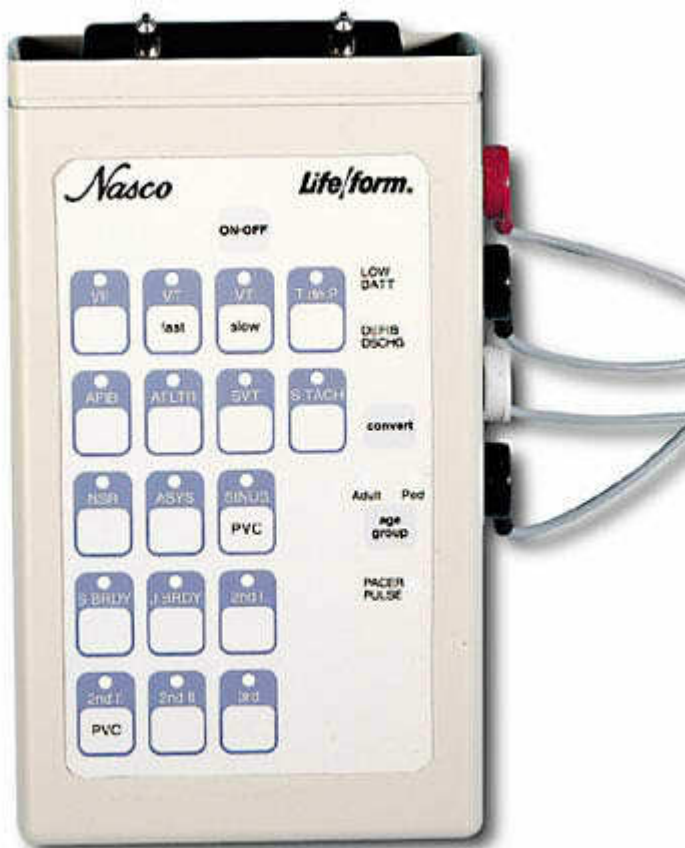

Cena bez DPH

1.403,00 Eur

Cena s DPH

1.683,60 Eur

Parametre

Množstevná jednotka

ks

1. jediný simulátor kombinujúci výučbu používania defibrilátora a vonkajšieho stimulátora s dospelými a pediatrickými EKG rytmi, pre použitie s dospelou a detskou figurínou pre nácvik krízových stavov
2. simuluje zabezpečenie externým kardiostimulátorom:
 - o pripojte stimulátor k figuríne a zahájte stimuláciu
 - o ak bude stimulačný prah nastavený na 70mA a viac, na monitore sa objavia stimulované komplexy
3. krivky dostupné pre výcvik kardiostimulácie obsahujú
 - o sinusové bradykardia
 - o junkčné bradykardia
 - o AV blokáda II.stupňa I.typu
 - o AV blokáda II.stupňa II.typu
 - o AV blokáda II.stupňa II.typu s extrasystolami
 - o AV blokáda III.stupňa
4. simuluje kardioverziu s manuálnym, poloautomatickým alebo automatickým defibrilátorom

5. pred defibrilačným výbojom aktivujte konverznú funkciu k výberu rytmu, ktorý sa objaví po výboji
6. krivky dostupné pre výcvik defibrilácie
7. komorová fibrilácia
8. rýchla komorová tachykardia
9. „pomalá“ komorová tachykardia
10. polymorfná komorová tachykardia
11. fibrilácia predsiení
12. flutter predsiení
13. supraventrikulárna tachykardia
14. sínusová tachykardia
15. sínusový rytmus s extrasystolami
16. asystólia
17. normálny sínusový rytmus
18. používajte jeden simulátor pre generáciu dospelých i detských rytmov:
 - v dospelom móde všetkých 17 tlačidiel generuje krivky rytmov dospelého
 - v detskom móde všetkých 17 tlačidiel generuje detské krivky
 - pre prepnutie z dospelého na detský mód stlačte tlačidlo "veková skupina" - tak máte k dispozícii 34 kriviek naraz
19. generujte realistické 3 - alebo 4-zvodové EKG, morfológia signálu zo zvodov RA, LA a LL vytvára presnú reprezentáciu osi QRS, P a T
20. vhodný pre nácvik defibrilácie / vonkajšej kardiostimulácie bez figuríny - pripojte defibrilátor / stimulátor k simulátoru pomocou adaptérov, zabudovaný obvod Vám dovoľuje defibrilovať a stimulovať priamo na simulátore a sledovať EKG rytmy prostredníctvom adaptérov
21. LED indikátory označujú
 - stimulovanú akciu
 - vybitie defibrilátora
 - dospelú vekovú skupinu
 - detskú vekovú skupinu
 - slabé batérie
22. automatické vypnutie simulátora pokiaľ nie je v prevádzke šetrí batérie